

Advarsel! Dette symbol angiver vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed. Følg disse anvisninger nøje.



Læs brugervejledningen, før du tager udstyret i brug! Det er vigtigt, at du forstår indholdet i brugervejledningen fuldt ud, før du tager udstyret i brug.

CE

30-10-2020

Dokumentnummer: M10-060DK rev.01

Tilsligtet brug

Instrumentbord til placering af kirurgiske instrumenter og udstyr under et kirurgisk indgreb.
Produktet er beregnet til brug af læger på et hospital eller en klinik.




Sikkerhedsbestemmelser

Maksimal belastning: 2,5 kg jævnt fordelt, iht. EN 60601-1 og EN 60601-2.

Kontroller, at udstyret fungerer korrekt, før du tager det i brug!


Når du løsner låsehåndtaget for at justere højden, skal du understøtte instrumentbordet med hånden for at forhindre, at det utilsigtet glider ned til nederste position.

Service og forebyggende vedligeholdelse skal udføres af autoriseret personale.

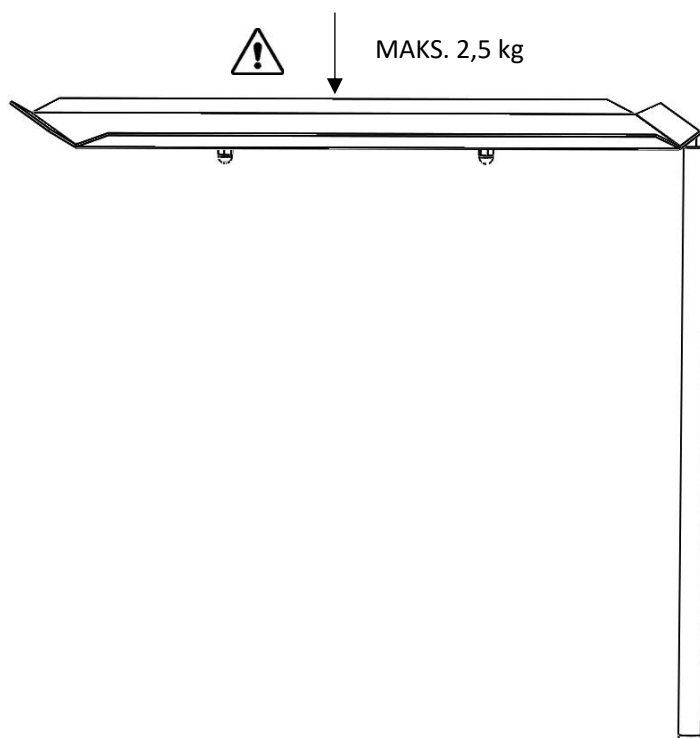

Anvisninger i brug

Installation

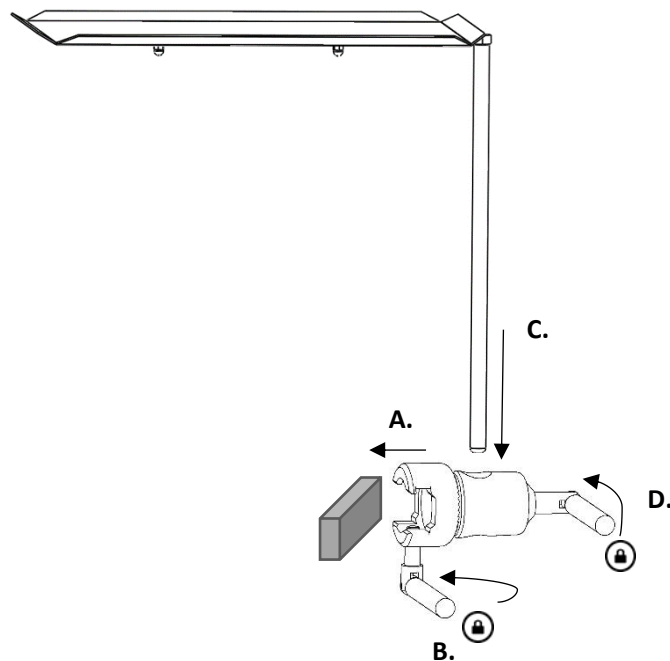

Vedligeholdelse

Service, forebyggende vedligeholdelse, justering og reparation må kun udføres af autoriseret personale. Det er strengt forbudt at ændre på konstruktionen uden skriftlig tilladelse fra producenten.


Rengøring

Rengør udstyret med antiseptisk rengøringsmiddel med pH 6-8 og varmt vand. Det er tilladt at bruge ethanol. Tør efter med en blød klud. Brug ikke stærkt sure eller basiske rengøringsmidler.

Kontrol

Kontroller, at der ikke er skader på nogen del af instrumentbordet. Kontroller den topmøtrik, der holder bakken fast på stativet, og tilspænd den efter behov.

Reservedele

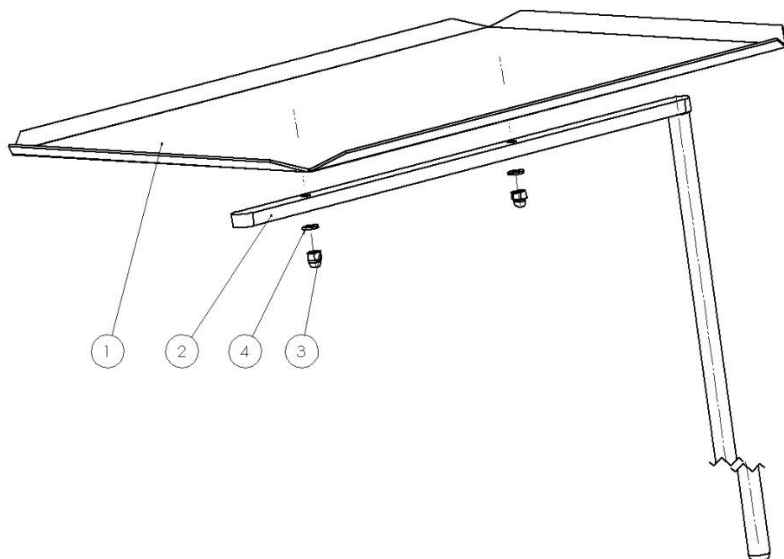

Nr.	Beskrivelse	Stk.	Varenr.
1.	Instrumentbakke	1	11217
2.	Stativ	1	11215
3.	Topmøtrik M6 A2	2	-
4.	Spændeskive BRB 6,4x12x1,5 A2	2	-

Tilbehør

Varenr.	Beskrivelse
10-304	Radialklemme til fastgørelse på operationsbordets tilbehørsskinne
10-305	Radialklemme til fastgørelse på operationsbordets tilbehørsskinne

Tekniske specifikationer

Maksimal belastning	2,5 kg jævnt fordelt, iht. EN 60601-1 og EN 60601-2
Vægt	2,9 kg
Materiale	Rustfrit stål
Mål (H x B x L)	470 x 400 x 500 mm
UDI-DI	07350111830328



Reison Medical AB

Eriksbergsvägen 32A

734 92 Hallstahammar

SVERIGE

+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se