

Mise en garde ! Ce symbole indique des informations importantes relatives à la sécurité. Suivez attentivement ces instructions.



Veuillez lire le manuel d'instructions avant utilisation ! Il est important de bien comprendre le contenu du manuel d'instructions avant d'utiliser l'équipement.

CE

2020-10-30

Numéro du document : M10-060FR rev.01

Utilisation prévue

Table à instruments pour poser le matériel et les instruments chirurgicaux utilisés lors d'une chirurgie. Le produit doit être utilisé par des professionnels de la santé dans une structure médicale.




Consignes de sécurité

Charge maximale : 2,5 kg en répartition uniforme conformément aux normes EN 60601-1 et EN 60601-2.

Avant utilisation, assurez-vous du bon fonctionnement !


Lors du desserrage du valet de bloqueur pour régler la hauteur, soutenez le dessous de la table à instruments pour l'empêcher de descendre de manière incontrôlée en position inférieure.

Le service de maintenance et l'entretien préventif doivent être effectués par du personnel agréé.

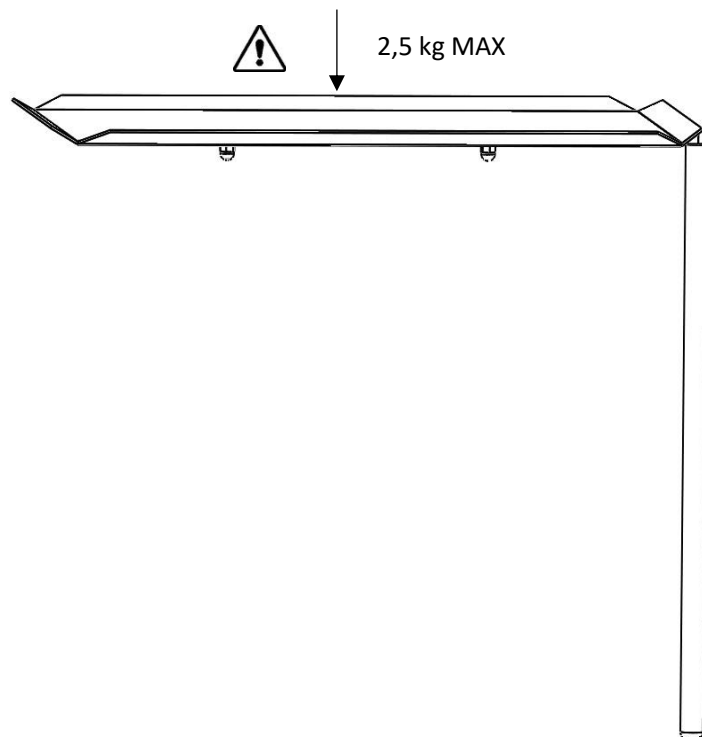

Instructions d'utilisation

Installation

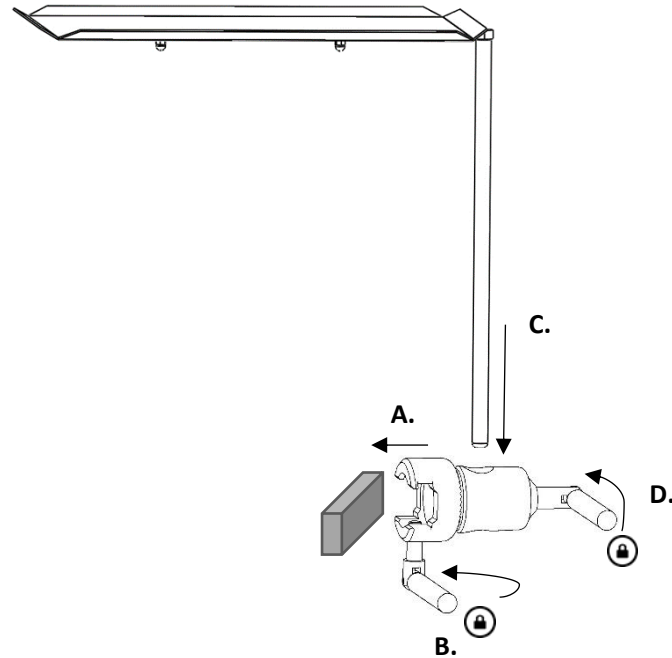

Maintenance

Le service de maintenance, l'entretien préventif, le réglage et les réparations doivent être effectués par du personnel agréé. Modifier la structure sans le consentement écrit du fabricant est strictement interdit.


Nettoyage

Nettoyez avec un détergent antiseptique dont le pH est compris entre 6 et 8 et de l'eau chaude. Vous pouvez utiliser de l'éthanol. Essuyez avec un chiffon doux. N'utilisez pas de détergent acide ou alcalin puissant.

Contrôle

Vérifiez qu'aucune partie de la table à instruments n'est endommagée. Vérifiez et, si nécessaire, serrez le dôme de l'écrou qui fixe le plateau au support.

Pièces de rechange

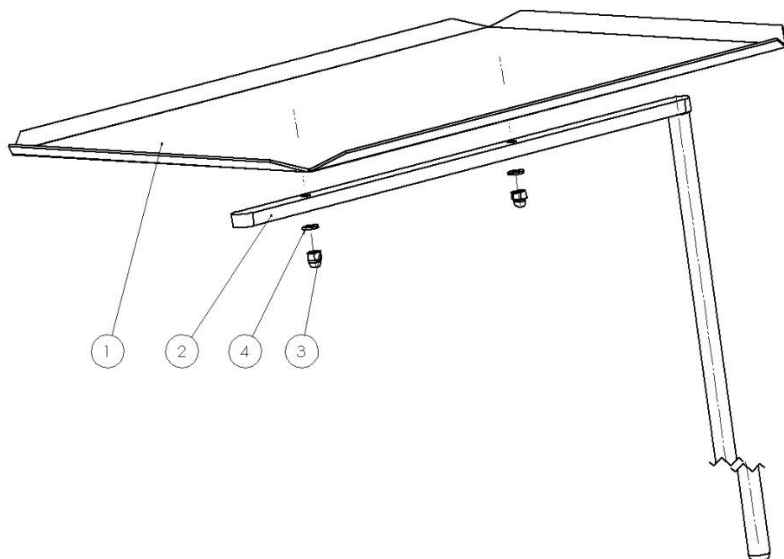

N°	Description	Unités	Article n°
1.	Plateau pour instruments	1	11217
2.	Support	1	11215
3.	Dôme d'écrou M6 A2	2	-
4.	Rondelle d'écrou BRB 6,4x12x1,5 A2	2	-

Accessoires

Article n°	Description
10-304	Pince radiale pour fixation au rail pour accessoires de la table d'opération
10-305	Pince radiale pour fixation au rail pour accessoires de la table d'opération

Spécifications techniques

Charge de travail maximale	2,5 kg en répartition uniforme conformément aux normes EN 60601-1 et EN 60601-2
Poids	2,9 kg
Matériau	Acier inoxydable
Dimension (H x l x L)	470 x 400 x 500 mm
UDI-DI	07350111830328



Reison Medical AB

Eriksbergsvägen 32A

734 92 Hallstahammar

SUÈDE

+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se