

Advarsel! Dette symbolet viser til viktig sikkerhetsinformasjon. Følg disse instruksjonene omhyggelig.



Les brukerveiledningen før bruk! Det er viktig å ha forstått innholdet i brukerveiledningen fullt ut før du prøver å ta utstyret i bruk.

CE

2020-10-30

Dokumentnummer: M10-060NO rev.01

Tiltenkt bruk

Instrumentbord til plassering av kirurgiske instrumenter og utstyr som skal brukes under operasjoner. Produktet skal brukes av helsepersonell innenfor en medisinsk institusjon.




Sikkerhetsforskrifter

Maksimal belastning: 2,5 kg jevnt fordelt, i henhold til EN 60601-1 og EN 60601-2.

Kontroller riktig funksjon før bruk!


Når du løsner låsespaken for å justere høyden, må instrumentbordet støttes under for å hindre det i å falle ukontrollert ned i nederste posisjon.

Service og forebyggende vedlikehold skal utføres av autorisert personell.

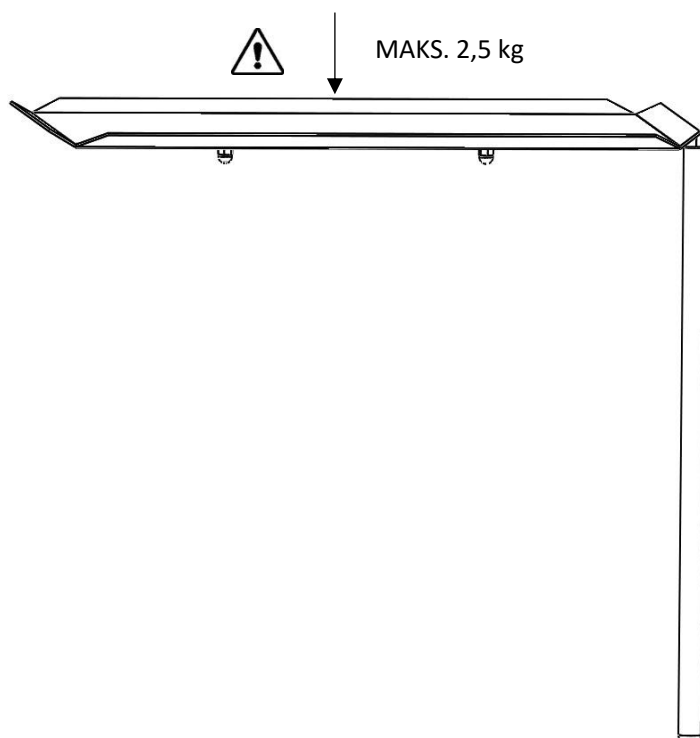

Bruksanvisning

Montering

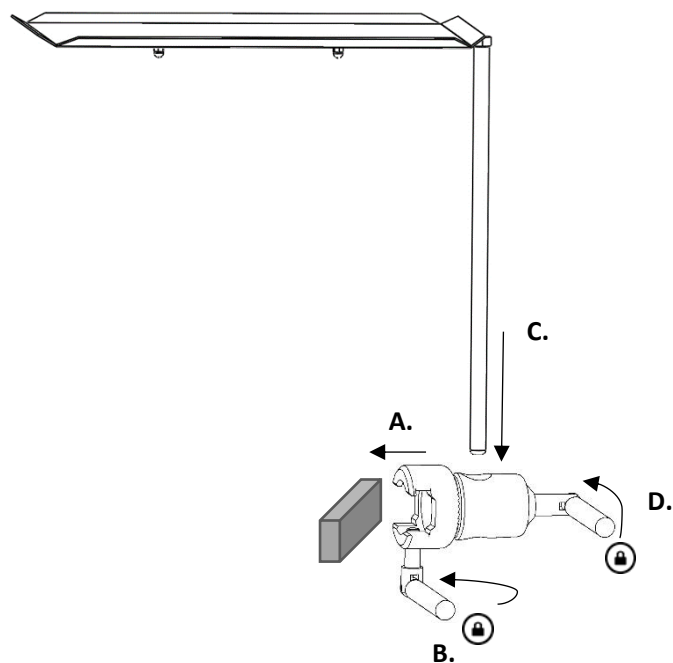

Vedlikehold

Service, forebyggende vedlikehold, justeringer og reparasjoner skal utelukkende utføres av autorisert personell. Det er strengt forbudt å endre konstruksjonen uten skriftlig samtykke fra produsenten.


Rengjøring

Rengjøres med antiseptisk rengjøringsmiddel med pH 6–8 og varmt vann. Etanol kan brukes. Tørkes med en myk klut. Sterkt syreholdige eller alkaliske vaskemidler skal ikke brukes.

Kontroll

Sjekk at ingen del av instrumentbordet er skadet. Sjekk hettemutteren som fester brettet til understellet, og stram den hvis det er nødvendig.

Reservedeler

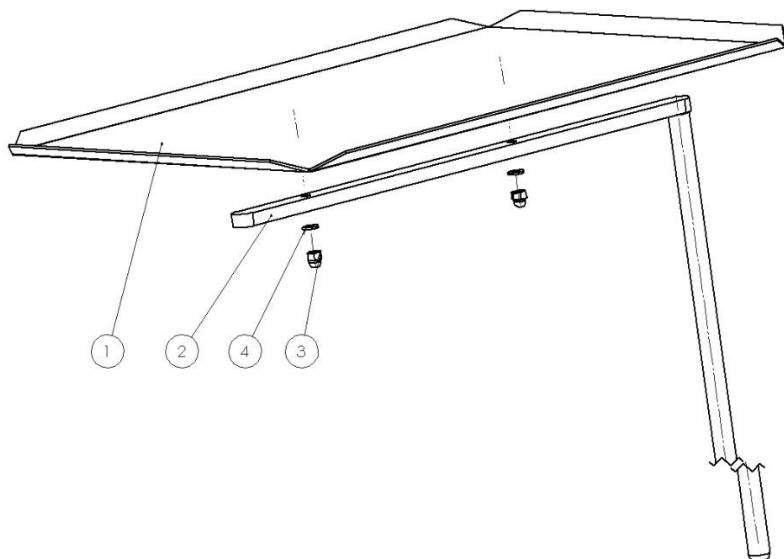

Nr.	Beskrivelse	Ant.	Artikkelnr.
1.	Instrumentbrett	1	11217
2.	Understell	1	11215
3.	Hettemutter M6 A2	2	–
4.	Underlagsskive BRB 6,4x12x1,5 A2	2	–

Tilbehør

Artikkelnr.	Beskrivelse
10-304	Radialfeste til bruk på utstyrsskinne på operasjonsbord
10-305	Radialfeste til bruk på utstyrsskinne på operasjonsbord

Tekniske spesifikasjoner

Maksimal arbeidsbelastning	2,5 kg jevnt fordelt, i henhold til EN 60601-1 og EN 60601-2
Vekt	2,9 kg
Materiale	Rustfritt stål
Mål (H x B x L)	470 x 400 x 500 mm
UDI-DI	07350111830328



Reison Medical AB

Eriksbergsvägen 32A

734 92 Hallstahammar

SVERIGE

+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se