


Supporto per artroscopia 10-353 comprese le versioni

---



Versione	Descrizione
10-353	Asta da $\varnothing 20$ mm, lato a V
10-353-18	Asta da $\varnothing 18$ mm
10-353-18-B	Asta da $\varnothing 18$ mm, lato piatto
10-353-US	Asta da $\varnothing 18$ mm, cuscinetti esclusi
10-353-XL	Asta da $\varnothing 20$ mm, lato a V. Modifica per gambe più grandi

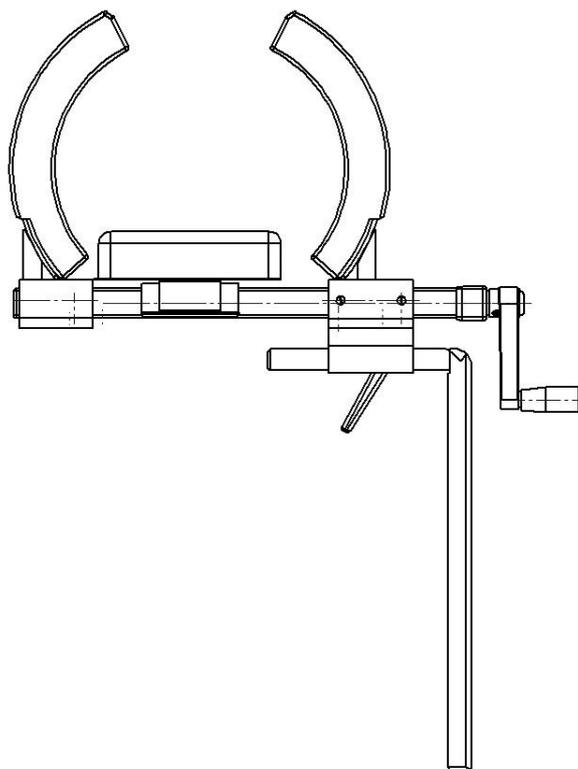

Avviso! Questo simbolo indica informazioni importanti relative alla sicurezza. Seguire attentamente queste istruzioni.



Leggere il Manuale d'uso prima dell'utilizzo! È importante comprendere appieno il contenuto del manuale d'uso prima di tentare di utilizzare l'apparecchiatura.

**CE**

30-10-2020

Numero documento: M10-353IT rev. 01

## Usò previsto

---

Il supporto per artroscopia si utilizza per fissare e posizionare la gamba del paziente durante l'intervento chirurgico nella zona del ginocchio. Il prodotto deve essere utilizzato da medici professionisti all'interno di una struttura medica.



## Norme di sicurezza

---


Carico massimo: 40 kg, corrispondente a un paziente del peso di 215 kg, secondo le norme EN 60601-1 ed EN 60601-2.

Prima dell'uso, assicurarsi che l'apparecchiatura funzioni correttamente!

Quando si allenta la leva di blocco per regolare la posizione, sostenere il supporto per artroscopia da sotto per evitare che scenda in maniera incontrollata nella posizione inferiore.


Per evitare lesioni da pressione al paziente, i cuscinetti sui supporti verticali possono essere compressi al massimo del 20% quando si fissa la gamba del paziente.

Le attività di assistenza e manutenzione preventiva devono essere eseguite da personale autorizzato.

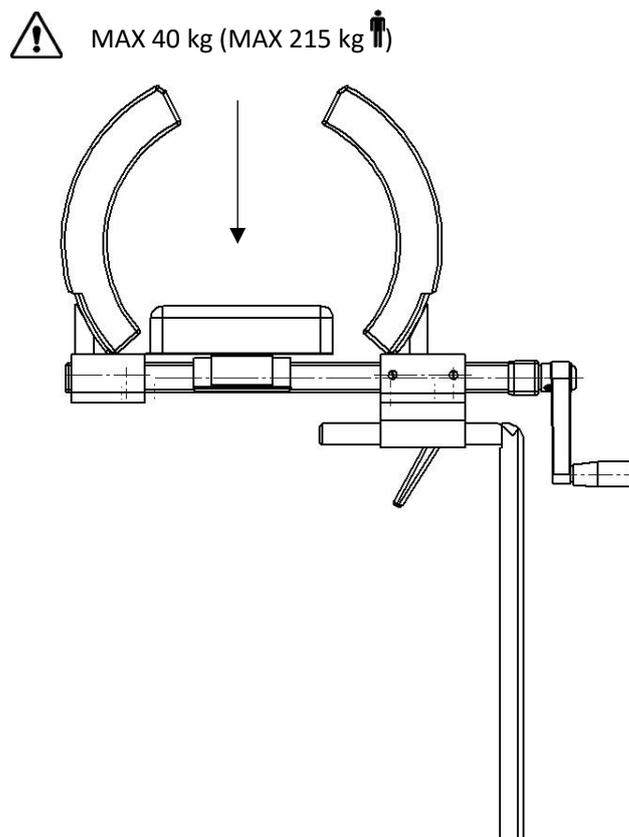


# Istruzioni d'uso

## Installazione

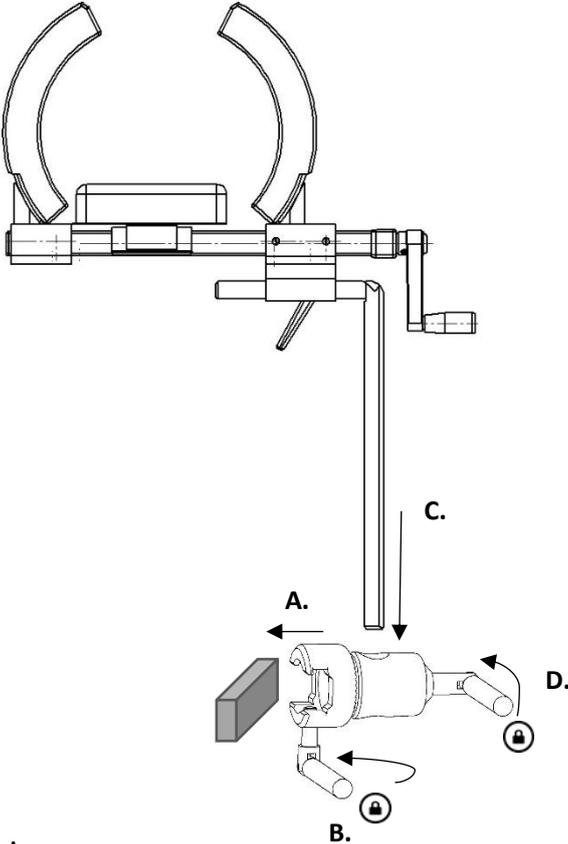

## Regolazione della posizione

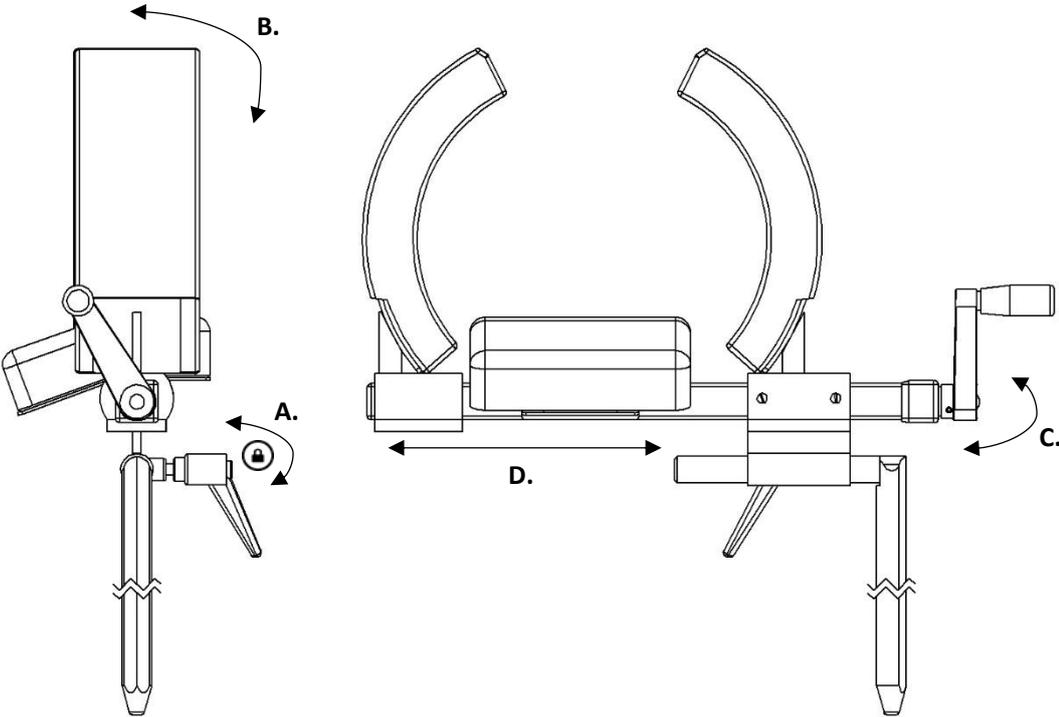



## Manutenzione

Le attività di assistenza, manutenzione preventiva, regolazione e riparazione devono essere eseguite unicamente da personale autorizzato. È severamente vietato alterare la struttura senza un consenso scritto da parte del produttore.

## Pulizia

Pulire con un detergente antisettico avente un pH di 6 – 8 e acqua tiepida. Si può utilizzare l'etanolo sulle superfici metalliche. Asciugare con un panno morbido. Non utilizzare detergenti acidi o alcalini forti.


## Controllo

Controllare che non vi siano parti allentate e danneggiate. Controllare la funzione di blocco/posizionamento del supporto per artroscopia. Controllare che i cuscinetti siano puliti e privi di danni.

## Manutenzione annuale

Una volta l'anno, il supporto per artroscopia deve essere pulito in maniera accurata, le parti in movimento devono essere lubrificate e la funzione di blocco/posizionamento deve essere testata.

## Pezzi di ricambio

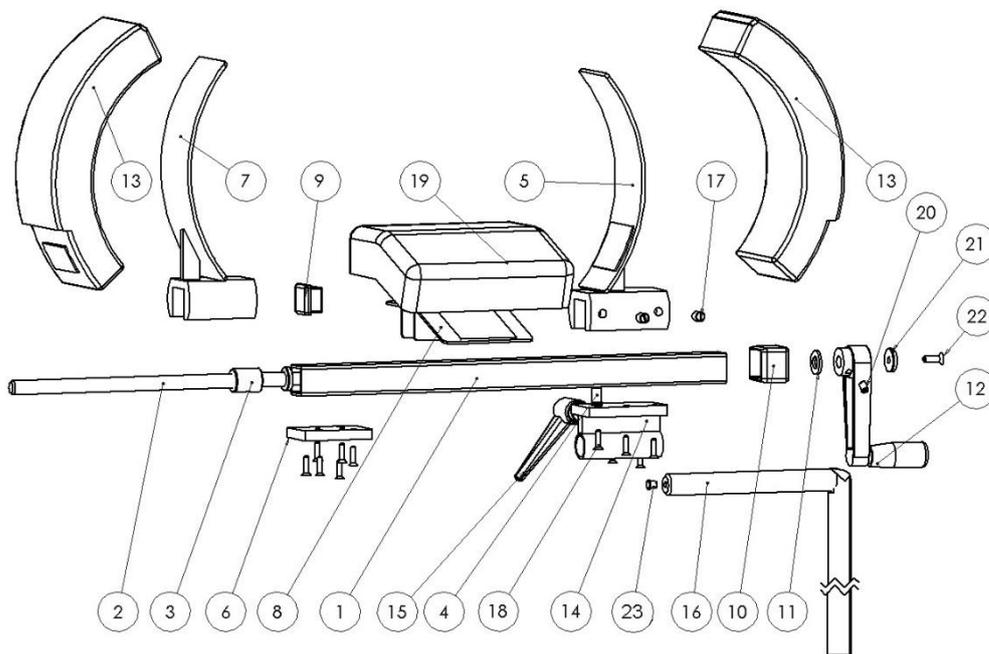

Descrizione	Versione:	10-353	10-353-18	10-353-18-B	10-353-US	10-353-XL
	Pz.	Articolo n.				
1. Tubo di supporto	1	10376	10376	10376	10376	10376
2. Vite di regolazione	1	10382	10382	10382	10382	10382
3. Dado	1	10383	10383	10383	10383	10383
4. Dito di trascinamento	1	10887	10887	10887	10887	10887
5. Supporto mobile	1	10371	10371	10371	10371	11776
6. Coperchio	1	10407	10407	10407	10407	10407
7. Supporto fisso	1	10372	10372	10372	10372	11775
8. Porta cuscinetto	1	10442	10442	10442	10442	10442
9. Tappo di plastica IFR 25x25x2	1	-	-	-	-	-
10. Tappo di plastica	1	10888	10888	10888	10888	10888
11. Rondella BRB 10,5x20x2 nylon	1	-	-	-	-	-
12. Manovella GN 471B	1	-	-	-	-	-
13. Cuscinetto	2	10125	10125	10125	-	11785
14. Giunzione mobile	1	10379	10379	10379	10379	10379
15. Leva di blocco regolabile GN300 S63-8	1	-	-	-	-	-
16. Attacco clamp	1	10386	10624	11479	10624	10386
17. Vite di fissaggio PSS M8x10 nylon	2	-	-	-	-	-
18. Vite MF6S M4x16 A2	12	-	-	-	-	-
19. Cuscinetto	1	10441	10441	10441	-	10441
20. Vite di fissaggio MSK6SS M6x8	1	-	-	-	-	-
21. Rondella	1	10003	10003	10003	10003	10003
22. Vite MF6S M5x16 A2	1	-	-	-	-	-
23. Tappo di plastica IKPT 85,5 S	1	-	-	-	-	-

## Specifiche tecniche

---

Carico di lavoro massimo 40 kg, corrispondente a un paziente del peso di 215 kg, secondo le norme EN 60601-1 ed EN 60601-2

Materiale del supporto per artroscopia Acciaio inox

<b>Versione</b>	<b>UDI-DI</b>	<b>Peso</b>	<b>Dimensioni (A x P x L)</b>
10-353	07350111831431	4,3 kg	265 x 130 x 465 mm
10-353-18	07350111831448	4,3 kg	265 x 130 x 465 mm
10-353-18-B	07350111831455	4,3 kg	265 x 130 x 465 mm
10-353-US	07350111831462	4,3 kg	265 x 130 x 465 mm
10-353-XL	07350111831479	4,5 kg	340 x 130 x 465 mm



Reison Medical AB

Eriksbergsvägen 32A

734 92 Hallstahammar

SVEZIA

+46 (0)220 433 99 | [order@reison.se](mailto:order@reison.se) | [info@reison.se](mailto:info@reison.se)