

Warnung! Dieses Symbol kennzeichnet wichtige sicherheitsrelevante Informationen. Befolgen Sie die hier aufgeführten Anweisungen genau.



Vor Verwendung die Bedienungsanleitung lesen! Es ist wichtig, dass Sie den Inhalt der Bedienungsanleitung vollständig verstehen, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

**CE**

2023-03-01

Dokumentnummer: M10-552/554DE Rev.03

## Verwendungszweck

---

Arm- und Beinschutz zum Abstützen und Halten des Arms und Beins des Patienten auf dem OP-Tisch während der Operation und des Transports. Die Verwendung des Produkts ist medizinischem Fachpersonal in medizinischen Einrichtungen vorbehalten.




## Sicherheitsvorschriften

---

Maximale Belastung: 10 kg im gleichmäßigen Verrieb nach EN 60601-1 und EN 60601-2.

Kontrollieren Sie die ordnungsgemäße Funktion, bevor Sie das Produkt verwenden!

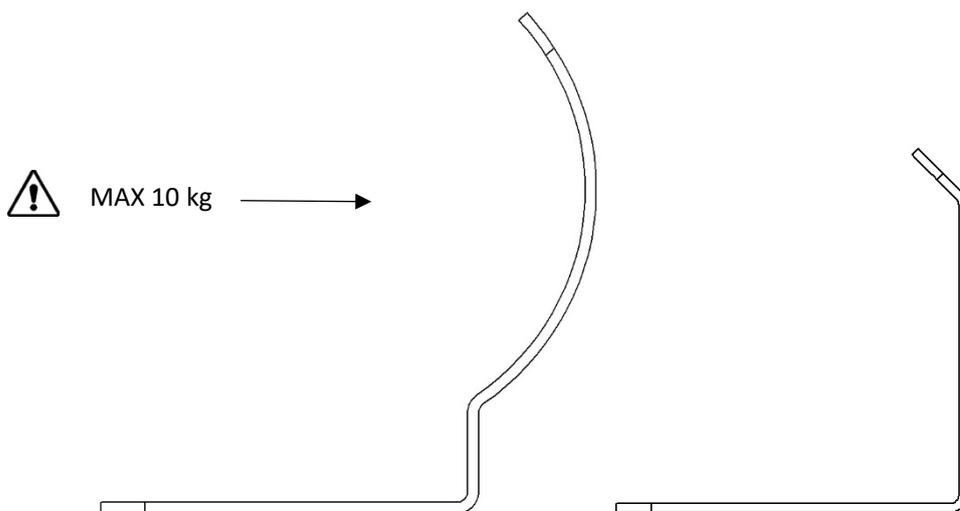

## Nutzungshinweise

---

### Montage

Der Arm- und Beinschutz wird mit dem flachen Ende unter der Matratze auf dem OP-Tisch positioniert. Der Arm- und Beinschutz wird durch das Gewicht des Patienten in Position gehalten.

### Reinigung

Mit antiseptischem Reinigungsmittel mit einem pH-Wert von 6-8 und warmem Wasser reinigen. Ethanol kann verwendet werden. Mit einem weichen Tuch abtrocknen. Verwenden Sie kein stark saures oder alkalisches Reinigungsmittel.

### Kontrolle

Vergewissern Sie sich, dass alle Teile unbeschädigt sind. Kontrollieren Sie bei Verwendung einer Abdeckung, dass diese sauber und unbeschädigt ist.

## Zubehör

---

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>10-553</b>	Gepolsterte Abdeckung für 10-552
<b>10-555</b>	Gepolsterte Abdeckung für 10-554
<b>10-557</b>	Gepolsterte Abdeckung für 10-556

## Technische Daten

---

<b>Art.-Nr.</b>	<b>UDI-DI</b>	<b>Maximale Belastung</b>	<b>Abmessungen (H x B x L)</b>	<b>Gewicht</b>	<b>Material</b>
10-552	07350111831646	10 kg	230 x 230 x 565 mm	1,5 kg	PETG
10-554	07350111831660	10 kg	210 x 200 x 400 mm	0,9 kg	PETG
10-556	07350111832667	10 kg	230 x 230 x 300 mm	0,8 kg	PETG



Reison Medical AB  
Eriksbergsvägen 32A  
734 92 Hallstahammar  
SCHWEDEN  
+46 (0)220 433 99 | [order@reison.se](mailto:order@reison.se) | [info@reison.se](mailto:info@reison.se)