

Advarsel! Dette symbol angiver vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed. Følg disse anvisninger nøje.



Læs brugervejledningen, før du tager udstyret i brug! Det er vigtigt, at du forstår indholdet i brugervejledningen fuldt ud, før du tager udstyret i brug.

CE

2023-03-01

Dokumentnummer: M10-552/554DK rev.03

Tilsigtet brug

Arm- og benbeskytteren er beregnet til at støtte og holde patientens arm og ben på operationsbordet under kirurgiske indgreb og transport. Produktet er beregnet til brug af læger på et hospital eller en klinik.




Sikkerhedsbestemmelser

Maksimal belastning: 10 kg jævnt fordelt, iht. EN 60601-1 og EN 60601-2.

Kontroller, at udstyret fungerer korrekt, før du tager det i brug!



MAKS. 10 kg

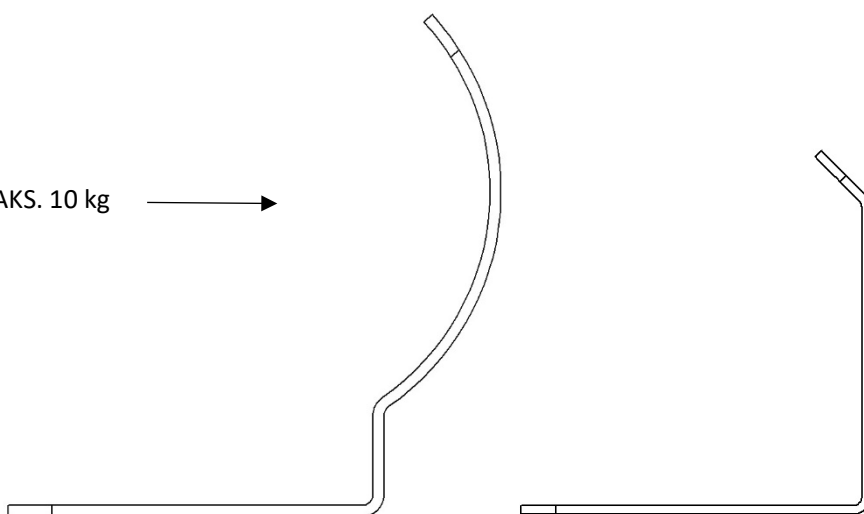

Anvisninger i brug

Installation

Arm- og benbeskytteren placeres med den flade ende under madrassen på operationsbordet. Arm- og benbeskytteren holdes på plads af patientens vægt.

Rengøring

Rengør udstyret med antiseptisk rengøringsmiddel med pH 6-8 og varmt vand. Det er tilladt at bruge ethanol. Tør efter med en blød klud. Brug ikke stærkt sure eller basiske rengøringsmidler.

Kontrol

Kontroller, at der ikke er skader på nogen del. Kontroller, at overtrækket er rent og fri for skader, hvis der anvendes et overtræk.

Tilbehør

Varenr.	Beskrivelse
10-553	Polstret overtræk til 10-552
10-555	Polstret overtræk til 10-554
10-557	Polstret overtræk til 10-556

Tekniske specifikationer

Varenr.	UDI-DI	Maksimal belastning	Mål (H x B x L)	Vægt	Materiale
10-552	07350111831646	10 kg	230 x 230 x 565 mm	1,5 kg	PETG
10-554	07350111831660	10 kg	210 x 200 x 400 mm	0,9 kg	PETG
10-556	07350111832667	10 kg	230 x 230 x 300 mm	0,8 kg	PETG



Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
SVERIGE
+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se