


Protector de brazo y pierna 10-552/554/556



¡Advertencia! Este símbolo indica información importante relacionada con la seguridad. Siga estas instrucciones detenidamente.

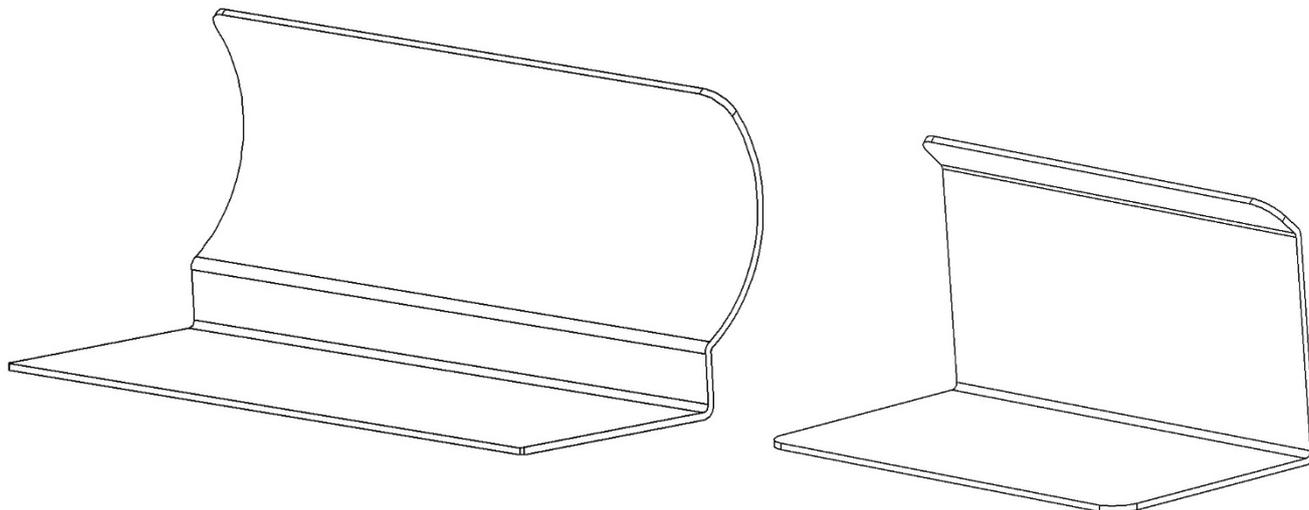

¡Lea el Manual de usuario antes de usar el equipo! Es importante entender completamente el contenido del Manual de usuario antes de intentar utilizar el equipo.

CE

2023-03-01

Número de documento: M10-552/554ES rev.03

Uso previsto


Protector de brazo y pierna destinado al apoyo y el mantenimiento del brazo y la pierna del paciente en la mesa de operaciones durante la cirugía y el traslado. El producto debe ser utilizado por profesionales médicos dentro de unas instalaciones médicas.



Normativa de seguridad

Carga máxima: 10 kg con distribución uniforme, según las normas EN 60601-1 y EN 60601-2.

Antes de su uso, ¡asegúrese de que funcione correctamente!

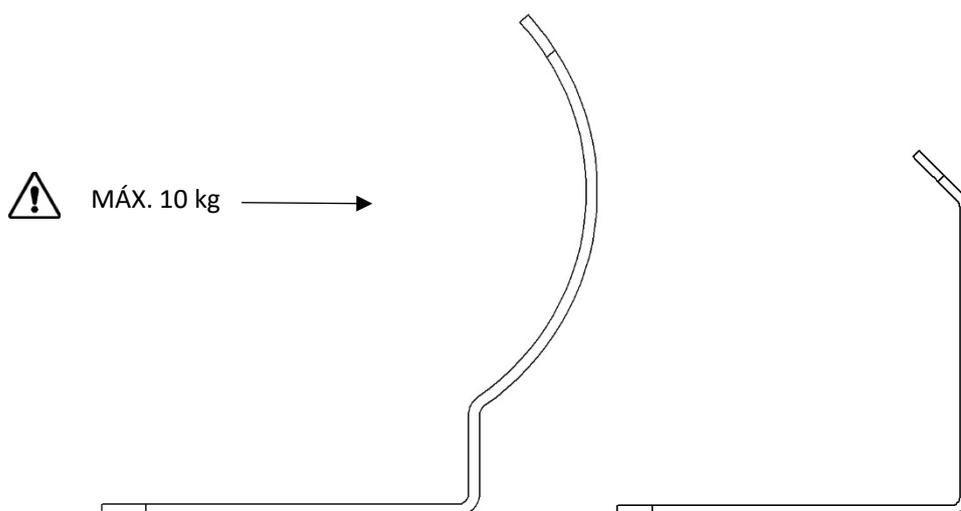

Instrucciones de uso

Instalación

El protector de brazo y pierna debe situarse con su extremo plano bajo el colchón o la mesa de operaciones. El protector de brazo y pierna se mantiene en posición mediante el propio peso del paciente.

Limpieza

Límpiala con un detergente antiséptico con un pH 6–8 y agua tibia. Se puede utilizar etanol. Séquela con un paño suave. No utilice un detergente ácido o alcalino fuerte.

Control

Compruebe que no haya daños en ninguna pieza. Si se utiliza una cubierta, compruebe que esté limpia y no se encuentre dañada.

Accesorios

N.º de artículo	Descripción
10-553	Cubierta acolchada para 10-552
10-555	Cubierta acolchada para 10-554
10-557	Cubierta acolchada para 10-556

Especificaciones técnicas

N.º de artículo	UDI-DI	Carga máxima	Dimensiones (Alto × Ancho × Largo)	Peso	Material
10-552	07350111831646	10 kg	230 × 230 × 565 mm	1,5 kg	PETG
10-554	07350111831660	10 kg	210 × 200 × 400 mm	0,9 kg	PETG
10-556	07350111832667	10 kg	230 × 230 × 300 mm	0,8 kg	PETG



Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
SUECIA
+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se