

**Avviso** Questo simbolo indica informazioni importanti relative alla sicurezza. Seguire attentamente queste istruzioni.



Leggere il Manuale d'uso prima dell'utilizzo! È importante comprendere perfettamente il contenuto del manuale d'uso prima di cercare di utilizzare l'attrezzatura.

**CE**

2023-03-01

Numero documento: M10-552/554IT rev.03

## Uso previsto

---

Protezione per braccio e gamba destinata a sostenere e mantenere il braccio e la gamba del paziente sul tavolo operatorio durante l'intervento chirurgico e il trasporto. Il prodotto deve essere utilizzato da medici professionisti all'interno di una struttura medica.




## Norme di sicurezza

---

Carico massimo: 10 kg con una distribuzione uniforme, secondo le norme EN 60601-1 ed EN 60601-2.

Prima dell'uso, accertarsi del corretto funzionamento.

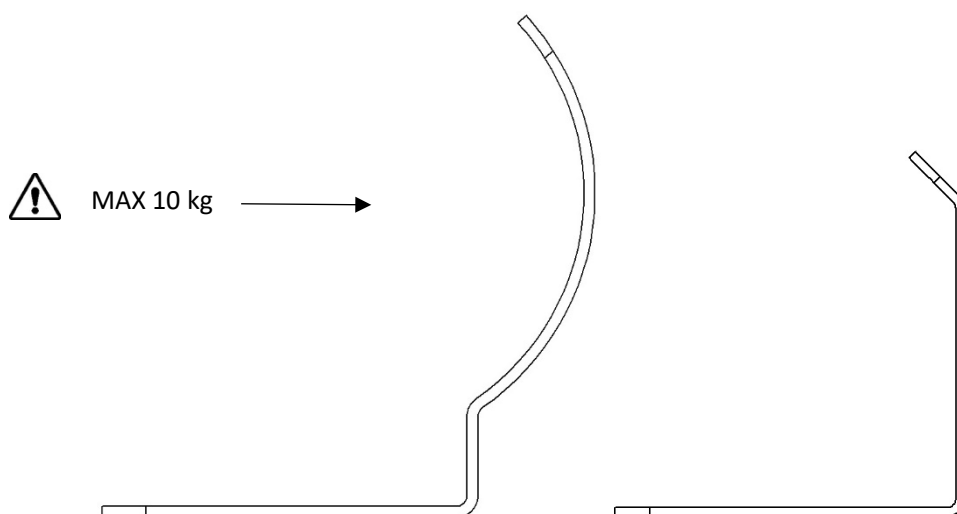

## Istruzioni d'uso

---

### Installazione

La protezione per braccio e gamba è posizionata con l'estremità piatta sotto il materasso sul tavolo operatorio. La protezione per braccio e gamba è tenuta in posizione dal peso del paziente.

### Pulizia

Pulire con un detergente antisettico avente un pH di 6 – 8 e acqua tiepida. Si può utilizzare l'etanolo. Asciugare con un panno morbido. Non utilizzare detergenti acidi o alcalini forti.

### Controllo

Controllare che non vi siano danni a nessuna parte. Se si utilizza una copertura, controllare che sia pulita e priva di danni.

### Accessori

---

<b>Articolo n.</b>	<b>Descrizione</b>
<b>10-553</b>	Copertura imbottita per 10-552
<b>10-555</b>	Copertura imbottita per 10-554
<b>10-557</b>	Copertura imbottita per 10-556

### Specifiche tecniche

---

<b>Articolo n.</b>	<b>UDI-DI</b>	<b>Carico massimo</b>	<b>Dimensione (A x P x L)</b>	<b>Peso</b>	<b>Materiale</b>
10-552	07350111831646	10 kg	230 x 230 x 565 mm	1,5 kg	PETG
10-554	07350111831660	10 kg	210 x 200 x 400 mm	0,9 kg	PETG
10-556	07350111832667	10 kg	230 x 230 x 300 mm	0,8 kg	PETG



Reison Medical AB  
Eriksbergsvägen 32A  
734 92 Hallstahammar  
SVEZIA  
+46 (0)220 433 99 | [order@reison.se](mailto:order@reison.se) | [info@reison.se](mailto:info@reison.se)