

Ostrzeżenie! Ten symbol wskazuje na ważną informację dotyczącą bezpieczeństwa. Należy ściśle przestrzegać towarzyszących mu instrukcji.



Przed użyciem przeczytać podręcznik obsługi! Bardzo ważne jest całkowite zrozumienie treści podręcznika obsługi przed przystąpieniem do obsługi sprzętu.

**CE**

2023-03-01

Numer dokumentu: M10-552/554PL wer. 03

## Przeznaczenie

---

Ostona ramienia i nogi do ustawiania i unieruchamiania ramienia i nogi pacjenta na stole operacyjnym w trakcie operacji oraz transportu. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego przez pracowników służby zdrowia na terenie placówek opieki zdrowotnej.



## Zasady bezpieczeństwa


---

Maksymalne obciążenie: 10 kg rozłożone równomiernie, zgodnie z wymaganiami norm EN 60601-1 i EN 60601-2.

Przed użyciem upewnić się co do poprawnego funkcjonowania sprzętu!



MAKS. 10 kg →

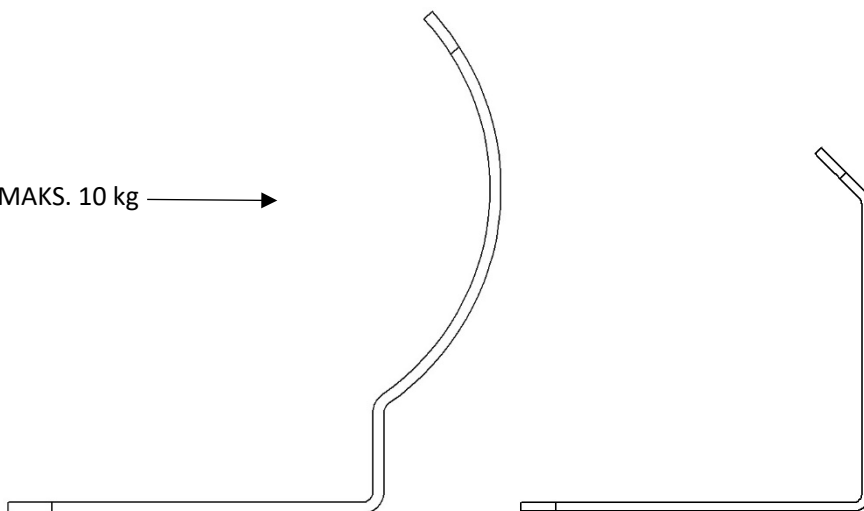

## Instrukcje dla użytkownika

---

### Instalowanie

Oślonę ramienia i nogi wsuwa się płaską stroną pod materac leżący na stole operacyjnym. Osłona ramienia i nogi pozostaje na swoim miejscu pod wpływem ciężaru pacjenta.

### Czyszczenie

Czyścić antyseptycznym środkiem czyszczącym o pH 6–8 i ciepłą wodą. Dozwolone użycie etanolu. Wytrzeć do sucha miękką szmatką. Nie stosować środków czyszczących silnie kwasowych bądź zasadowych.

### Kontrola

Sprawdzić, czy żadna z części nie jest uszkodzona. Jeżeli w użyciu jest osłona — sprawdzić, czy jest ona czysta i nieuszkodzona.

## Akcesoria

---

Numer artykułu	Opis
10-553	wyściełana osłona do 10-552
10-555	wyściełana osłona do 10-554
10-557	wyściełana osłona do 10-556

## Dane techniczne

---

Numer artykułu	UDI-DI	Maksymalne obciążenie	Wymiary (wys. × szer. × dł.)	Masa	Materiał
10-552	07350111831646	10 kg	230 × 230 × 565 mm	1,5 kg	PETG
10-554	07350111831660	10 kg	210 × 200 × 400 mm	0,9 kg	PETG
10-556	07350111832667	10 kg	230 × 230 × 300 mm	0,8 kg	PETG



Reison Medical AB  
Eriksbergsvägen 32A  
734 92 Hallstahammar  
SZWECJA  
+46 (0)220 433 99 | [order@reison.se](mailto:order@reison.se) | [info@reison.se](mailto:info@reison.se)