

Varning! Denna symbol indikerar särskilt viktig säkerhetsinformation. Följ dessa anvisningar noga.



Läs användarmanualen innan du börjar använda produkten! Det är viktigt att du förstår innehållet fullt ut innan du försöker använda utrustningen.

**CE**

2023-03-01

Dokument nummer: M10-552/554SE rev.03

## Avsedd användning

---

Armstöd avsett för att stöda och hålla patientens armar innanför operationsbordet under operation och transport. Produkten är avsedd att användas av professionell personal inom kirurgi på vårdinrättningar.



## Säkerhetsföreskrifter



---

Maxbelastning: 10 kg jämnt utbredd, enligt EN 60601-1 och EN 60601-2.

Utför en funktionskontroll före varje användningstillfälle!



MAX 10 kg

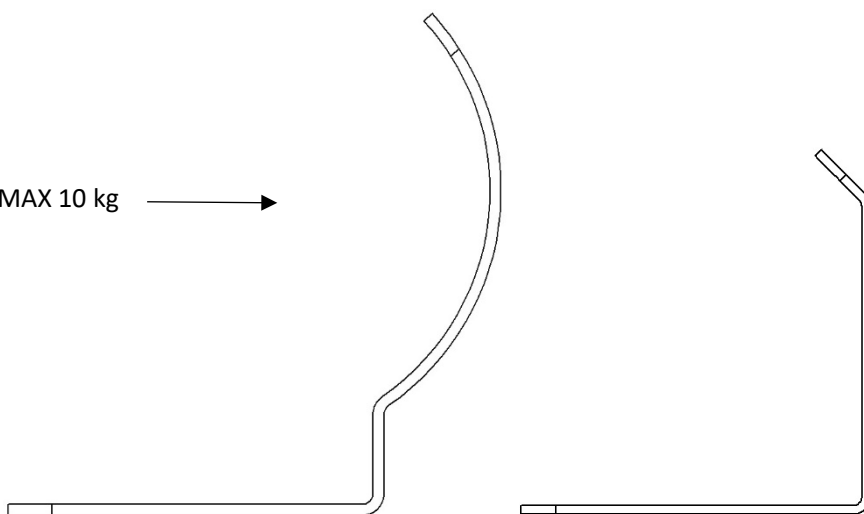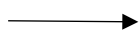

# Användarinstruktion

---

## Installation

Armstödet skjuts in under madrassen på operationsbordet och hålls på plats av patientens vikt

## Rengöring

Rengör med antiseptiskt tvåtvättmedel med pH 6 - 8 och varmt vatten. Etanol kan användas. Torka med mjuk torkduk. Använd inte tvättmedel som innehåller starka syror eller baser.

## Kontroll

Kontrollera innan användning att inga skador finns på Armstödet. Kontrollera att ev. överdrag inte har några skador där föroreningar kan fastna och bakterier ansamlas, som kan orsaka smitta.

## Tillbehör

---

<b>Artikelnr.</b>	<b>Beskrivning</b>
<b>10-553</b>	Vadderat överdrag till 10-552
<b>10-555</b>	Vadderat överdrag till 10-554
<b>10-557</b>	Vadderat överdrag till 10-556

## Teknisk specifikation

---

<b>Artikelnr.</b>	<b>UDI-DI</b>	<b>Maxbelastning</b>	<b>Dimension (H x B x L)</b>	<b>Vikt</b>	<b>Material</b>
10-552	07350111831646	10 kg	230 x 230 x 565 mm	1,5 kg	PETG
10-554	07350111831660	10 kg	210 x 200 x 400 mm	0,9 kg	PETG
10-556	07350111832667	10 kg	230 x 230 x 300 mm	0,8 kg	PETG



Reison Medical AB  
Eriksbergsvägen 32A  
734 92 Hallstahammar  
SWEDEN  
+46 (0)220 433 99 | [order@reison.se](mailto:order@reison.se) | [info@reison.se](mailto:info@reison.se)