

¡Advertencia! Este símbolo indica información importante relacionada con la seguridad. Siga estas instrucciones detenidamente.



¡Lea el Manual de usuario antes de usar el equipo! Es importante entender completamente el contenido del Manual de usuario antes de intentar utilizar el equipo.

CE

28-5-2021

Número de documento: M10-610/611ES rev.01

Uso previsto

Soporte para tubos destinado a recoger y organizar los tubos y cables durante las intervenciones quirúrgicas y los procedimientos de examen realizados en el quirófano. Los productos deben ser utilizados por personal médico capacitado.

Normativa de seguridad



Antes de su uso, asegúrese de que funciona correctamente.

CARGA MÁXIMA EN EL BRAZO FLEXIBLE


10-610	0,1 kg
10-611	0,2 kg

Instrucciones de uso


Montaje

El soporte para tubos se coloca con la placa plana debajo del colchón o de la mesa de quirófano. El peso del paciente hace que el soporte para tubos

10-610

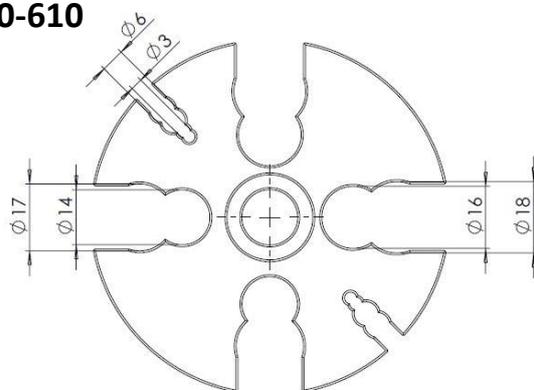

10-611

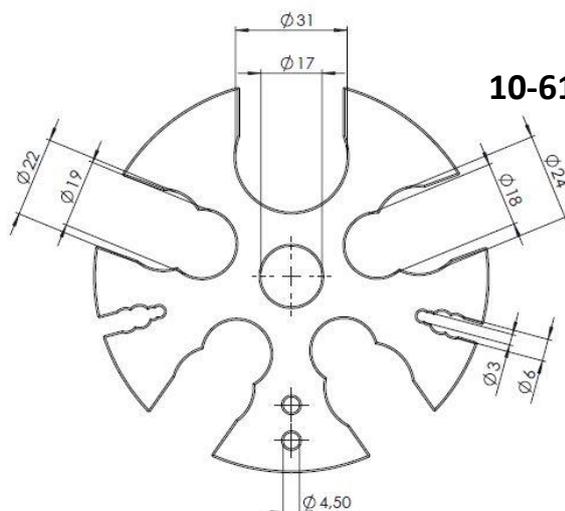

Limpieza

Límpiala con un detergente antiséptico con un pH 6–8 y agua tibia. Se puede utilizar etanol. Séquela con un paño suave. No utilice un detergente ácido o alcalino fuerte.

Especificaciones técnicas

N.º de artículo	UDI-DI	Carga máxima	Dimensiones de la placa (Alto x Ancho x Largo)	Longitud del brazo flexible	Peso	Material
10-610	07350111832698	0,1 kg	121 x 80 x 230 mm	30 cm	0,3 kg	PMMA; POM
10-611	07350111832704	0,2 kg	5 x 150 x 380 mm	43 cm	0,5 kg	PMMA; POM

REISON
MEDICAL

Reison Medical AB

Eriksbergsvägen 32A

734 92 Hallsthammar

SUECIA

+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se