


Calha lateral de segurança 10-530 incluindo versões

**Versão****10-530****10-530-US****10-530-UK****Descrição****Grampo (calha EU 25x10 mm)****Grampo (calha US 1 1/8" x 3/8")****Grampo (calha UK 1 1/4" x 1/4")**

Aviso! Este símbolo indica informações importantes relacionadas com segurança. Seguir atentamente estas instruções.

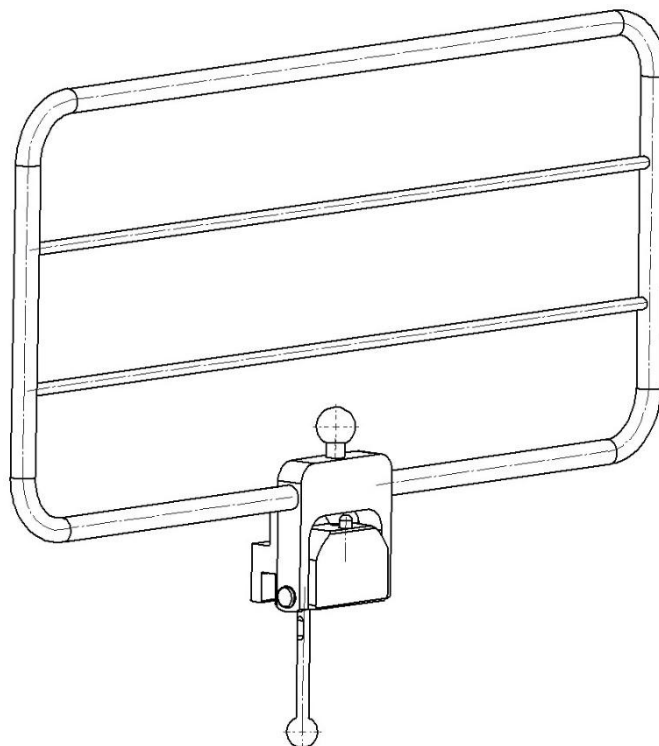

Ler o Manual do utilizador antes de utilizar! É importante compreender totalmente o conteúdo do manual do utilizador antes de tentar utilizar o equipamento.

CE

23/04/2021

Número do documento: M10-530 PT rev.01

Utilização prevista

Calha lateral de segurança para estabilizar e agir como uma barreira de proteção e apoio dos pacientes na maca durante uma cirurgia. Este produto deve ser utilizado por profissionais médicos, no interior de uma unidade de cuidados de saúde.



Regras de segurança


Carga máxima: 20 kg distribuídos por igual, o que corresponde a um paciente com um peso de 200 kg, de acordo com as normas EN 60601-1 e EN 60601-2.

Verificar se está a funcionar corretamente antes de utilizar!

Os serviços e manutenção preventiva devem ser feitos por pessoal qualificado.




MÁX 20 kg (MÁX 200 kg )


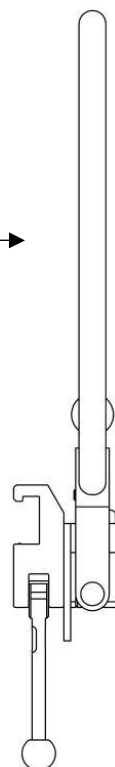


Instruções de utilização

Instalação

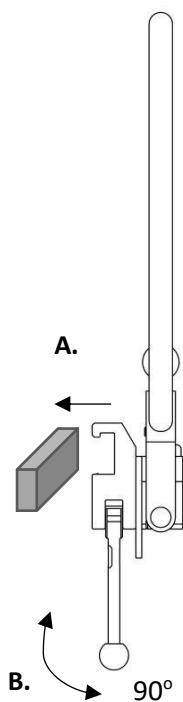

Ajuste da posição

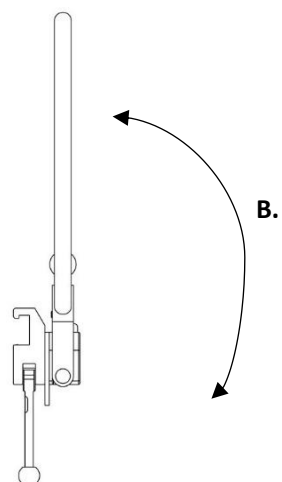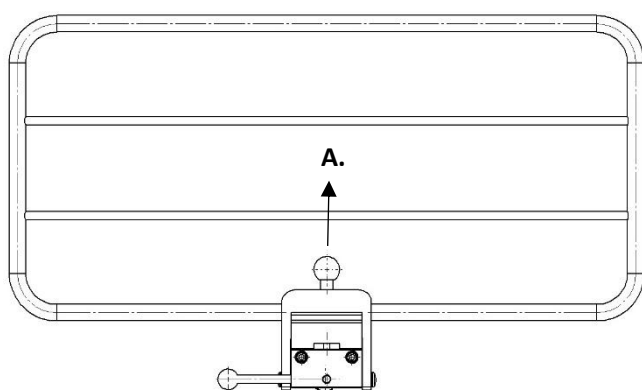

Manutenção



Os serviços, manutenção preventiva, ajustamentos e reparações devem ser feitos apenas por pessoal qualificado. É estritamente proibido alterar a construção sem uma autorização por escrito do fabricante.

Limpeza

Limpar com água morna e um detergente antisséptico com um pH 6 - 8. Também pode ser utilizado etanol nas superfícies de metal. Secar com um pano macio e seco. Não utilizar detergentes acídicos ou alcalinos fortes.


Verificações

Verificar se não há peças soltas e se nenhuma peça tem danos. Controlar a função de bloqueio da calha lateral. Se a capa vai ser utilizada, verificar se está limpa e não está danificada.

Serviço anual de manutenção

Uma vez por ano, limpar cuidadosamente a calha lateral, lubrificar todas as peças móveis e testar a função de bloqueio.

Peças sobressalentes

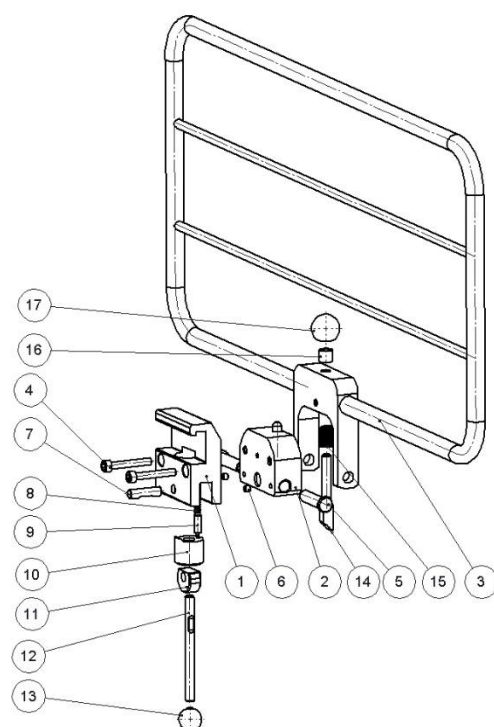

	Descrição	Versão: 10-530			
		Unid.	Artigo n.º	10-530-US Artigo n.º	10-530-UK Artigo n.º
1.	Estrutura do grampo	1	10460	10975	11272
2.	Pivô	1	10474	10474	10474
3.	Estrutura	1	10977	10977	10977
4.	Parafuso MC6S M6x40 FZB	2	-	-	-
5.	Veio	2	11359	11359	11359
6.	Parafuso de regulação MSK6SS M5x5 FZ	2	-	-	-
7.	Veio	1	10009	10009	10009
8.	Mola	1	10013	10013	10013
9.	Pino de pressão	1	10012	10012	10012
10.	Êmbolo	1	10711	10711	10711
11.	Excêntrico	1	11165	11165	11165
12.	Alavanca de bloqueio	1	10014	10014	10014
13.	Esfera	1	K20M8S	K20M8S	K20M8S
14.	Pino de retenção	1	10363	10363	10363
15.	Mola	1	10761	10761	10761
16.	Espaçador	1	10458	10458	10458
17.	Esfera	1	K25M8S	K25M8S	K25M8S

Acessórios

Artigo n.º	Descrição
10-530-H	Capa almofadada

Especificações técnicas

Carga operacional máxima	20 kg distribuídos por igual, o que corresponde a um paciente com um peso de 200 kg, de acordo com as normas EN 60601-1 e EN 60601-2.
Peso	2,8 kg
Dimensões (A x L x C)	370 x 40 x 630 mm
Material da calha lateral	Aço inoxidável Alumínio

Versão	UDI-DI
10-530	07350111831820
10-530-US	07350111831844
10-530-UK	07350111831837



Reison Medical AB

Eriksbergsvägen 32A

734 92 Hallstahammar

SUÉCIA

+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se